

Produtos Complementares

Especialidade



Complete o quebra-cabeça com a linha mais abrangente de produtos no mercado, para diagnóstico transfusional.

Transfuse | Transplant | Transform a life

The logo for IMMUCOR, featuring a stylized rainbow-colored arc above the word "IMMUCOR" in a bold, purple, sans-serif font.




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

A Immucor continua a ser uma parceira dedicada para o seu Laboratório e Banco de Sangue, com a mais ampla linha de produtos de elevada qualidade para imuno-hematologia completando o quebra-cabeça de doador e paciente.

	Total de Produtos	Total de Produtos Complementares
Immucor	75	18
Concorrente A	48	3
Concorrente B	32	0
Concorrente C	35	3
Concorrente D	21	215

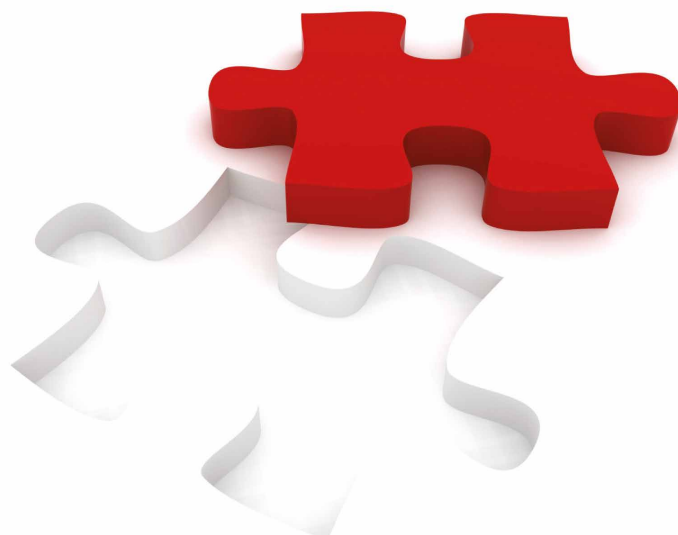

**Oferta dos concorrentes retirada dos catálogos de 2014*



Complete o seu portfólio do diagnóstico transfusional com **Produtos Complementares** da Immucor.

- A Immucor oferece a mais ampla gama de reagentes para o Laboratório do Banco de Sangue.
- A Immucor dispõe de todos os produtos necessários para capacitar o técnico a testar amostras básicas a complexas.
- Estes produtos ajudam a fornecer componentes sanguíneos o mais compatíveis possível, de forma segura para o paciente e com melhores resultados.

Produtos Complementares

Gamma® ELU-KIT® II

Eluição ácida rápida de anticorpos a partir de glóbulos vermelhos intactos

Código do Produto: 0007861.
Suficiente para 10 eluatos

Características do Produto

- Identificação de anticorpos a partir de amostras com TAD positivo;
- Amostras contendo múltiplos anticorpos. Armazenar à temperatura ambiente (15-30°C). Após aberto a Solução de Lavagem de Trabalho deve ser armazenada entre 1-10°C;
- Presença de um antígeno fraco.

Funções e Benefícios

- 2 anos de prazo de validade a partir da data de fabricação, reduz o desperdício devido ao prazo de validade extenso;
- Com o monitoramento de pH assegura a correta preparação do eluato sem necessidade de outros medidores de pH.

W.A.R.M.

Meio de Eliminação de Anticorpos a Quente

Código do Produto: 0057319
(10 x 5 mL)

Características do Produto

- W.A.R.M. remove o autoanticorpo e reduz a força do TAD positivo, que liberta os sítios de ligação dos antígenos para adsorção;
- Por comparação dos resultados do soro adsorvido utilizando W.A.R.M. com os resultados do soro não adsorvido, é possível identificar o autoanticorpo reativo a quente;
- Armazenar entre 1-10°C.

Funções e Benefícios

- Não é necessária pré-lavagem; economiza tempo;
- Procedimento de apenas um passo elimina a necessidade de passos adicionais de lavagem e tratamento enzimático dos glóbulos vermelhos; tempo de resposta menor;
- Não é necessário tratamento enzimático adicional, uma vez que este procedimento ocorre durante a eliminação do autoanticorpo; economiza tempo.

A Immucor fornece ao Laboratório a mais ampla gama de Produtos Complementares para compatibilizar doador e paciente.

RESt®

Eritrócitos de Estroma de Coelho (RESt). Eliminação de aglutininas frias

Código do Produto: 0057316
(8 x 1 mL)

Características do Produto

- Adsorção efetiva de aglutininas frias reativas tais como anti-I, anti-H ou anti-IH ajuda na resolução de testes de identificação de anticorpos;
- Usado como uma alternativa a adsorção fria autóloga;
- De forma segura adsorve aglutininas indesejadas do soro de pacientes recentemente transfundidos;
- Armazenar entre 1-10°C.

Funções e Benefícios

- Elimina a necessidade de grandes quantidades de glóbulos vermelhos do paciente para adsorção;
- Conclui adsorções frias sem a necessidade de pré-tratamento das células do paciente; economiza tempo.

Outros Produtos Complementares

Gamma[®]-Quin

Remoção de imunoglobulinas de glóbulos vermelhos

Código do Produto: 0007890
(1 x 10 mL)

Weak D Cells

Controle de Qualidade para reagentes anti-D

Código do Produto: 0002995
(1 x 5 mL)

Gamma[®] P1 Blood Group Substance

Neutralização de anti-P1

Código do Produto: 0007700
(1 x 2 mL)

Red Blood Cell (RBC) Storage Solution

Meio isotônico de suspensão e conservação de glóbulos vermelhos

Código do Produto: 0005036 (1L)

Gamma[®] Lewis Blood Group Substance


Neutralização de anti-Lea e anti-Leb

Código do Produto: 0007702
(1 x 2 mL)

Freeze Dried Papain

Utilizada como uma enzima proteolítica em testes sorológicos ou para pré tratar glóbulos vermelhos para adsorção

Código do Produto: 0057292
(10 x 2 mL)



Produto	Descrição de Modelos (Família)	Reg. ANVISA:
Freeze Dried Papain	10 x 2 mL	10154450186
GAMMA ELU-KIT II	Solução de Lavagem 1 x 50 mL Solução de Eluição 1 x 11 mL Solução Tampão 1 x 12 mL	10154450178
Gamma Lewis Blood Group Substance	1 x 2 mL	10154450188
Gamma P1 Blood Group Substance	1 x 2 mL	10154450187
Gamma-Quin	1 x 10 mL	10154450190
Red Blood Cell (RBC) Storage Solution	1L	10154450189
RESt	8 x 1 mL	10154450184
W. A. R. M.	10 x 5 mL	10154450185
Weak D Cells	01 x 5 mL	10154450198



Fabricado por:

Immucor, Inc.
3130 Gateway Drive
P.O. Box 5625 • Norcross, Georgia • EUA
30091.5625
8008292553
www.immunor.com

Quer receber informações
e conteúdos atualizados
da Fresenius Kabi?
Cadastre-se em nosso site:



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Registrado e Distribuído por:

Fresenius HemoCare Brasil Ltda.
CNPJ: 49.601.107/0001-84
Rua Roque Gonzáles, 128
CEP: 06855-690 • Itapeverica da Serra, SP
SAC: 0800 707 3855
www.fresenius-kabi.com.br