




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

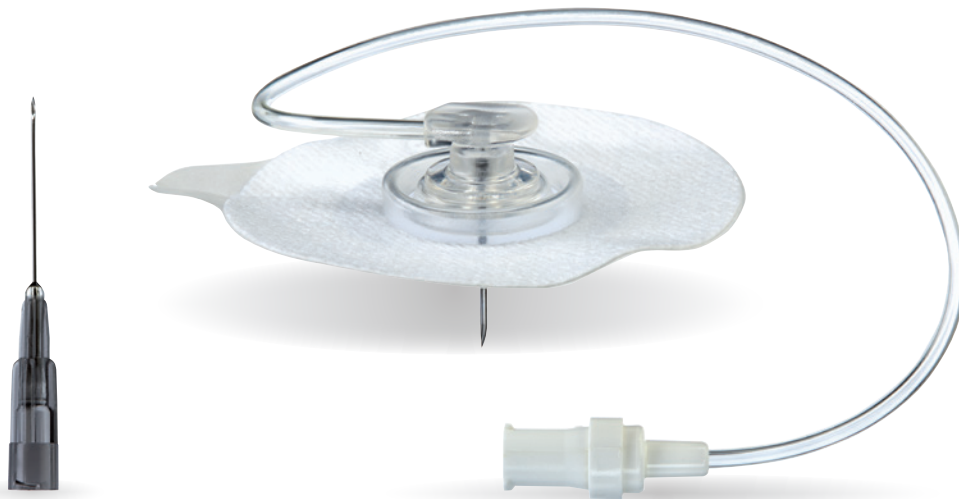

Ambix Intrastick[®] **Ambix** Safe-Can[®]

Portkanülen mit Löffelschliff

Spezialkanülen zur Punktion von Portmembranen. Der stanzarme Spezialschliff (Löffelschliff) sorgt für:

- Volle Funktionsfähigkeit der Membran
- Verlängerte Lebensdauer bei voller Funktion der Implantate
- Reduziertes Infektionsrisiko
- Kein Verstopfen des Katheters durch ausgestanzte Haut- oder Silikonpartikel
- Erhöhte Patientensicherheit

Ambix Intrastick® / Ambix Safe-Can®

Spezialkanülen mit Löffelschliff

Produktmerkmale Ambix Intrastick®

- Ambix Intrastick® mit Löffelschliff-Kanüle
- Portpunktionskanüle mit integriertem Klebeadhäsiv
- Integrierter Faltenbalg ermöglicht die Anpassung der Kanüle an die Einstechtiefe und dient zur Zugentlastung
- Polyurethanschlauch mit Sicherheitsventil erleichtert durch selbsttätige Funktion den Wechsel von Infusionsgeräten/ Spritzen und lässt dadurch keinen Lufteintritt zu
- Hochwertige Materialien ermöglichen die Verwendung auch aggressiver Medikamente
- Zuverlässige Fixierung der Kanüle in der Portmembran
- Schutz vor Manipulationen an der Kanüleneintrittsstelle, somit erhebliche Reduktion des Infektionsrisikos
- Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Klebepflaster und niedrige Bauhöhe
- Vermeidung störender Bewegungen an der Punktionskanüle, dadurch keine Beschädigungen der Portmembran

Produktmerkmale Ambix Safe-Can®

- Stanzarme Löffelschliffkanülen zur Punktion von implantierbaren Port- und Medikamentenpumpen-Membranen
- Erhältlich in geraden oder 90 Grad gebogenen Varianten



Ambix Safe-Can®
Gerade



Ambix Safe-Can®
90 Grad gebogen



Latex-frei
PVC-frei
DEHP-frei**

Bestellinformationen

Ambix Intrastick® Systeme zur Langzeitinfusion mit 20 cm Schlauch und Sicherheitsventil

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Größe (G)	Länge ca. (mm)
Ambix Intrastick® System	5	8080641	02061980	22	14
Ambix Intrastick® System	5	8080601	02076579	22	17
Ambix Intrastick® System	5	8180601	02184286	22	20
Ambix Intrastick® System	5	8080611	02240346	22	27
Ambix Intrastick® System	5	8180621	02061833	20	10
Ambix Intrastick® System	5	8080651	02061856	20	14
Ambix Intrastick® System	5	8080621	02061862	20	17
Ambix Intrastick® System	5	8180611	02061891	20	20
Ambix Intrastick® System	5	8080631	02061916	20	27

Siehe gesondertes Prospekt: „Ambix Intraport®, innovative Portsysteme“

*Verpackungseinheit

Ambix Safe-Can®: Gerade zur Bolus-Injektion und Pumpenfüllung

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Größe (G)	Länge ca. (mm)
Ambix Safe-Can®, gerade	10	5036711	02762174	22	25
Ambix Safe-Can®, gerade	10	5036721	02762205	22	37
Ambix Safe-Can®, gerade	10	5036801	02762211	22	60
Ambix Safe-Can®, gerade	10	5036741	02761803	20	37

Ambix Safe-Can®: 90 Grad gebogen

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Größe (G)	Länge ca. (mm)
Ambix Safe-Can®, gebogen	10	5036781	02497068	22	25
Ambix Safe-Can®, gebogen	10	5036791	02711834	22	37
Ambix Safe-Can®, gebogen	10	5036761	02434926	20	25
Ambix Safe-Can®, gebogen	10	5036771	02477019	20	37

*Verpackungseinheit

** Gemäß Verordnung (EC)1907/2006 (REACH) weniger als 0,1 % w/w DEHP



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen