



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Volumat Line AirBlock

Für einen hohen Komfort in der Infusionstherapie und eine optimierte Patientenversorgung

Kombiniert die bewährten Eigenschaften der Volumat Lines mit den Vorteilen einer AirBlock-Membran in der Tropfkammer

Verhindert das Eindringen von Luft in die Leitung

Infusionsset läuft bei Dauerinfusionen nicht leer

Ermöglicht einen optimierten Arbeitsablauf

Charakteristische blaue Farbcodierung an der Tropfkammer und Rollenklemme

DEHP- und latexfrei


Volumat Line AirBlock



Die Volumat Line AirBlock ist mit einer AirBlock-Membran am Boden der Tropfkammer ausgestattet, welche das Eindringen von Luft in die Leitung und somit ein Leerlaufen des Infusionssets bei Dauerinfusionen verhindert.

Dies ermöglicht einen optimierten Arbeitsablauf:

- Automatische Benachrichtigung durch die Infusionspumpe, sobald die Tropfkammer leerläuft
- Verringerte Notwendigkeit einer ständigen Überwachung des verbleibenden Infusionsvolumens und damit mehr Zeit für die Patientenbetreuung
- Reduzierung von Luftalarmen durch die Pumpe
- Vereinfachter Wechsel des Infusionsbehältnisses ohne Diskonnektion vom Patientenzugang

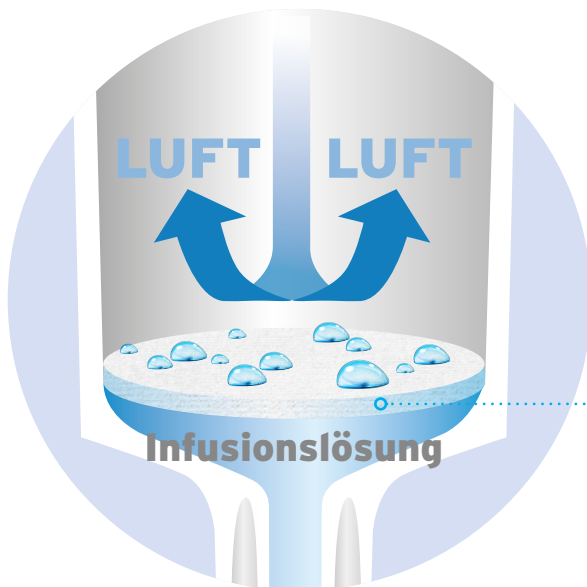

- Hydrophile Membran
- Hält die Luft in der Tropfkammer zurück, sodass keine Luft in die Leitung gelangen kann
- Porengröße der Membran: ca. 4µm
- Filtration von Partikeln > 4 µm
- Material: PES (Polyethersulfon)

Bestellinformation

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Volumat Line ST00 AirBlock	30 x 1 Stück	Karton	M46441020	17874128
Volumat Line ON22 AirBlock**	30 x 1 Stück	Karton	M46444210	18179784
Volumat Line ON70 AirBlock**	30 x 1 Stück	Karton	M46444610	17874134

* Verpackungseinheit | ** PVC-frei