



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# Volumat Line AirBlock

Für einen hohen Komfort in der Infusionstherapie und eine optimierte Patientenversorgung

Kombiniert die bewährten Eigenschaften der Volumat Lines mit den Vorteilen einer AirBlock-Membran in der Tropfkammer

Verhindert das Eindringen von Luft in die Leitung

---

Infusionsset läuft bei Dauerinfusionen nicht leer

---

Ermöglicht einen optimierten Arbeitsablauf

---

Charakteristische blaue Farbcodierung an der Tropfkammer und Rollenklemme

---

DEHP- und latexfrei

---


# Volumat Line AirBlock



Die Volumat Line AirBlock ist mit einer AirBlock-Membran am Boden der Tropfkammer ausgestattet, welche das Eindringen von Luft in die Leitung und somit ein Leerlaufen des Infusionssets bei Dauerinfusionen verhindert.

Dies ermöglicht einen optimierten Arbeitsablauf:

- Automatische Benachrichtigung durch die Infusionspumpe, sobald die Tropfkammer leerläuft
- Verringerte Notwendigkeit einer ständigen Überwachung des verbleibenden Infusionsvolumens und damit mehr Zeit für die Patientenbetreuung
- Reduzierung von Luftalarmen durch die Pumpe
- Vereinfachter Wechsel des Infusionsbehältnisses ohne Diskonnektion vom Patientenzugang

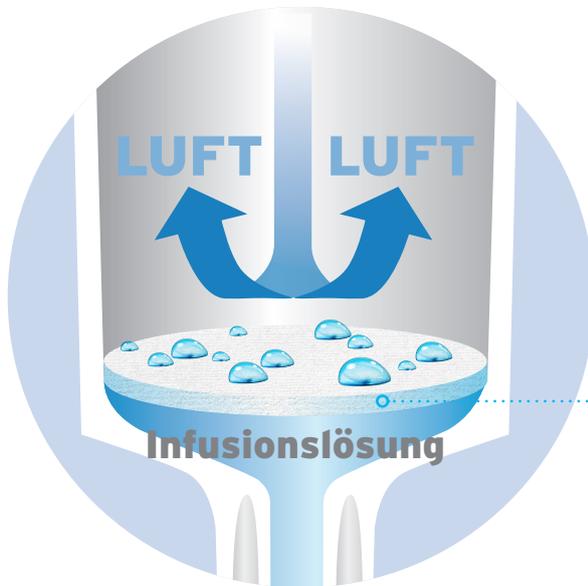

- Hydrophile Membran
- Hält die Luft in der Tropfkammer zurück, sodass keine Luft in die Leitung gelangen kann
- Porengröße der Membran: ca. 4µm
- Filtration von Partikeln > 4 µm
- Material: PES (Polyethersulfon)

## Bestellinformation

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Volumat Line ST00 AirBlock	30 x 1 Stück	Karton	M46441020	17874128
Volumat Line ON22 AirBlock**	30 x 1 Stück	Karton	M46444210	18179784
Volumat Line ON70 AirBlock**	30 x 1 Stück	Karton	M46444610	17874134

\* Verpackungseinheit | \*\* PVC-frei